


1. 如“开关按钮”未出现白色灯光即代表机器处于关机状态，请长按 5 秒“开关按钮”进行开机。




2. 请在 iPad wifi 设定里面选择跟显微镜机上名字一样的 wifi 名字。

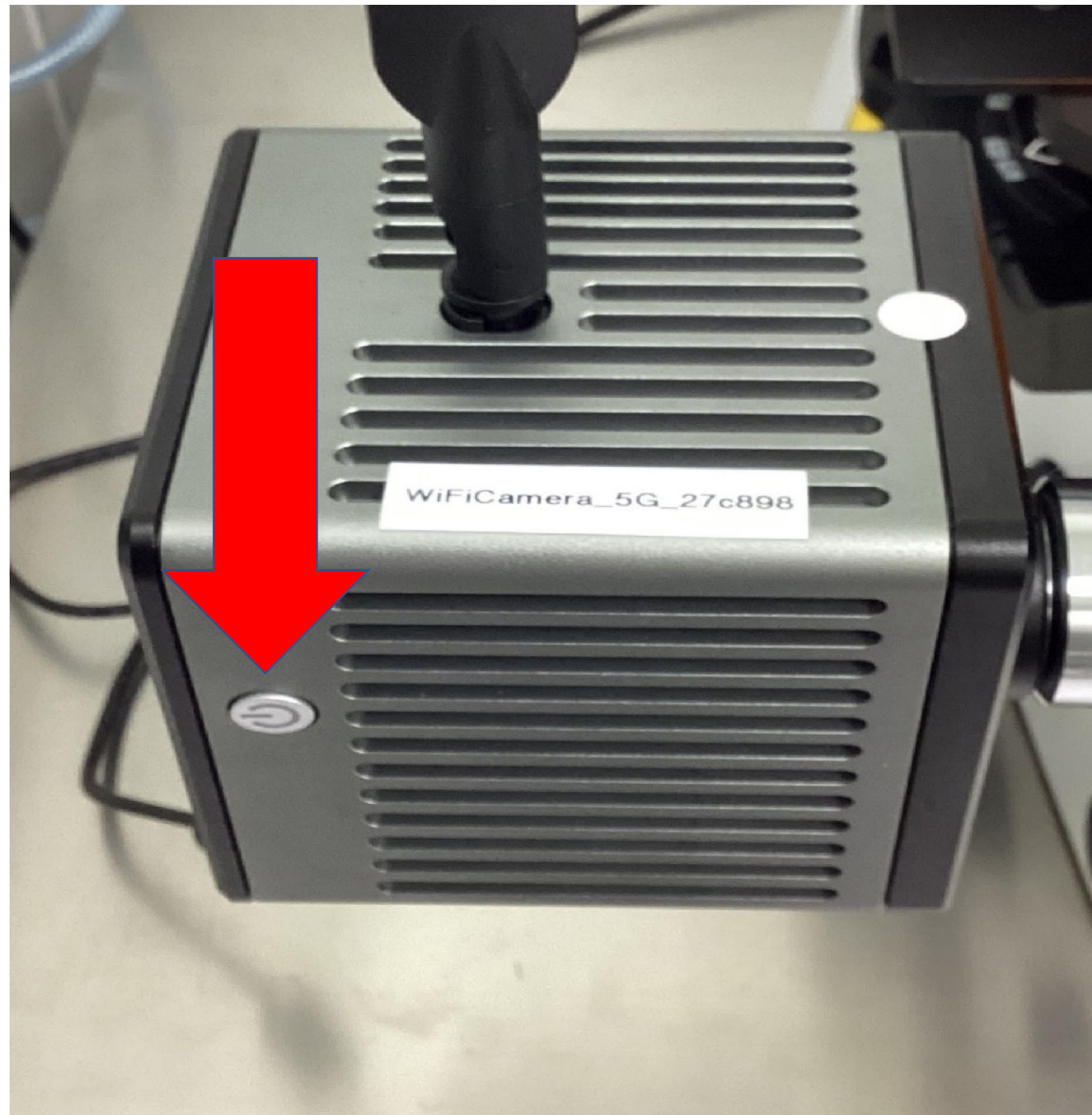

3. 打开“Kopa WiFi Lab”应用,




4. 点击“播放”按钮，即可观看显微镜影像。

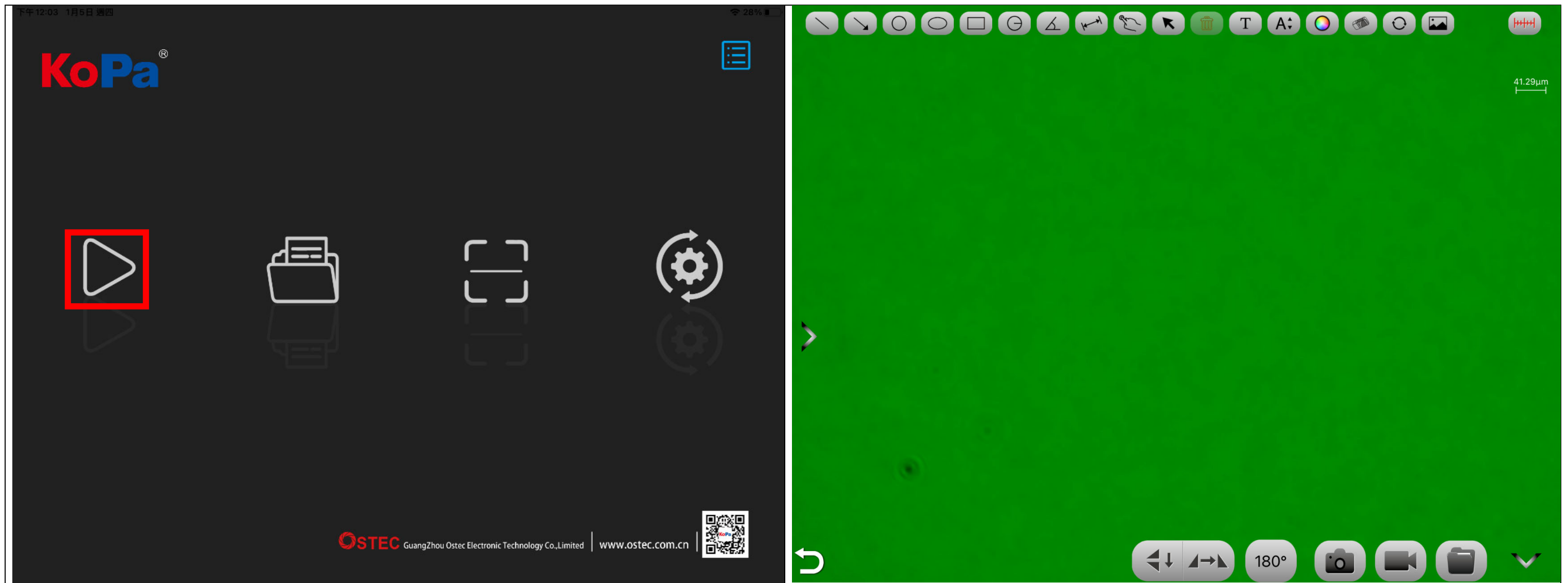

5. 点击“拍照”或“录影”按钮，可保存当前图像或活动视屏。您亦可使用工具在画面上添加或更改内容。




6. 点击“文件夹”按钮，即可查看已记录的显微镜图像或视频。

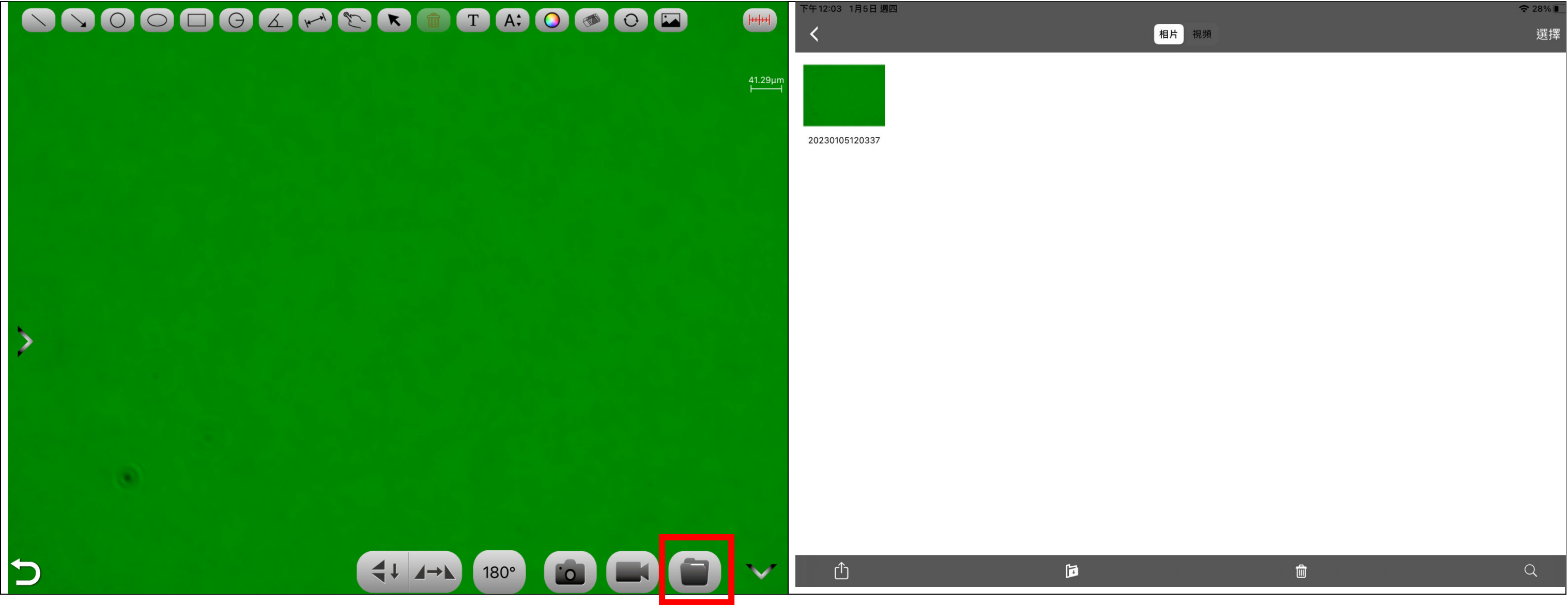

7. 导出图像/视屏- 按 iPad 上的”主页”按钮，打开”设定”->”Wi-Fi”， 连接”CRMH_HKISI_Staff”的 WIFI 热点。



8. 导出图像/视屏- 按 iPad 上的”主页”按钮，打开”文件”应用；打开”我的 iPad”->”Kopa WiFi Lab”->”Photos” 或 ”Video”文件夹。

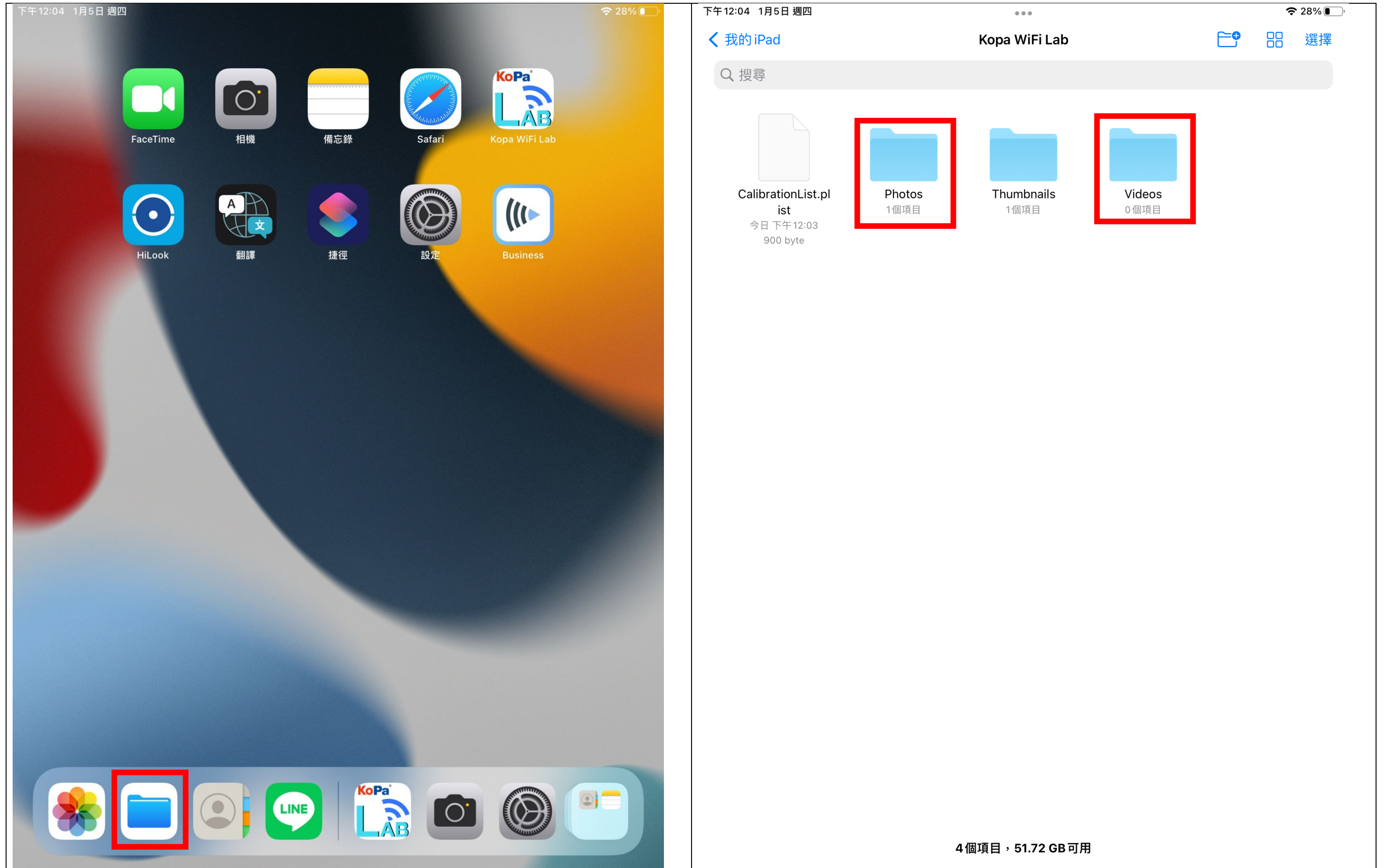

9. 导出图像/视屏 – 点击右上角“选择”，点选需要导出的档案，点击“移动”。

下午12:04 1月5日 週四

Kopa WiFi Lab

Photos

選擇

搜尋

2023010512033
7
今日 下午12:03
6.9 MB

1個項目，51.72 GB可用

下午12:04 1月5日 週四

檔案 取消全選

已選擇1個項目

完成

搜尋

2023010512033
7
今日 下午12:03
6.9 MB

1個項目，51.72 GB可用

↓

共享


製作副本

移動

刪除

更多

10. **导出** 图像/视屏 – 选择“192.168.20.6”->“Lab Data” -> “Microscope”, 然后点击“复制”; 完成导出。请到电脑上进行下一步动作。
如需再次使用显微镜, 请从第 1 步开始。

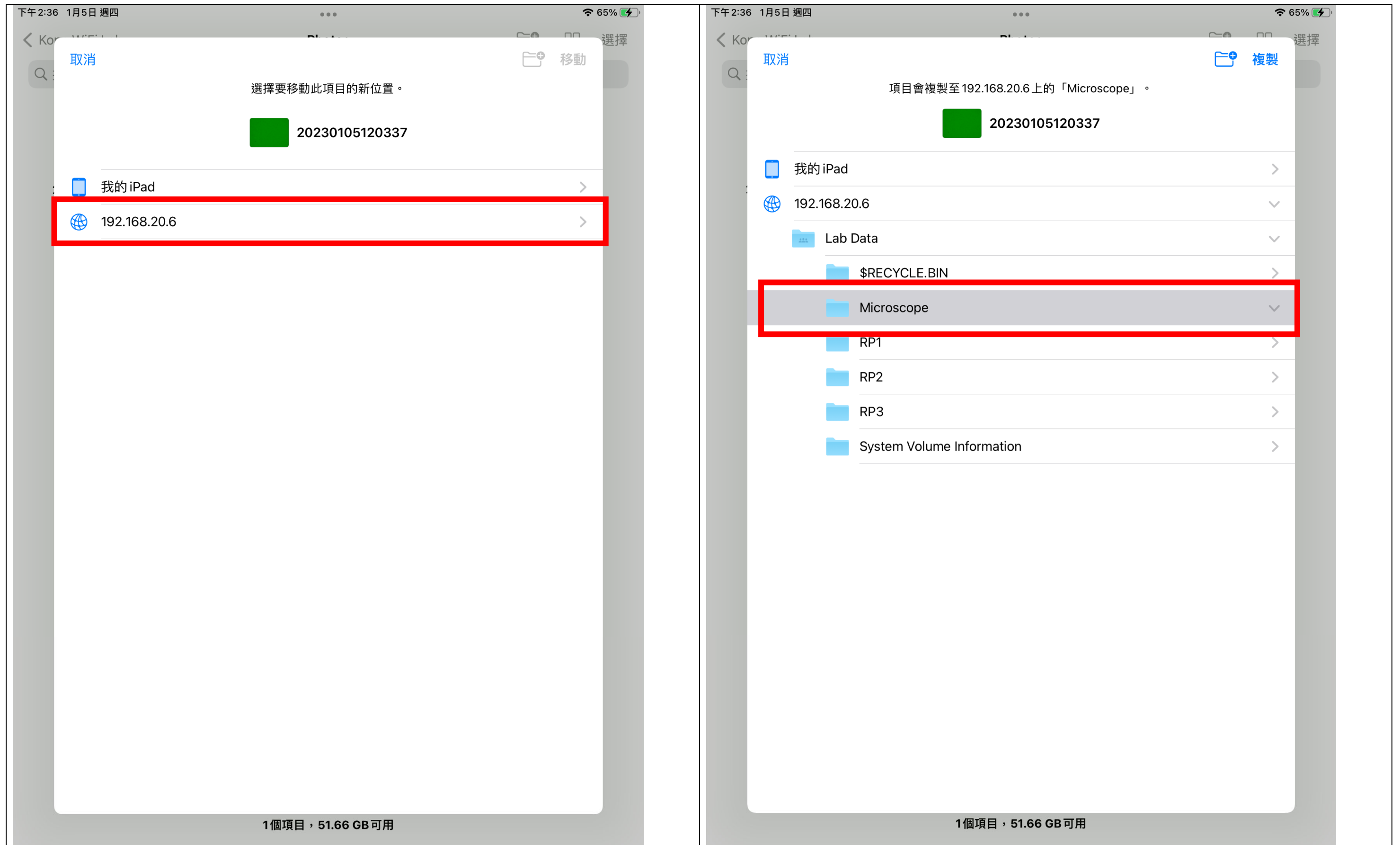

11. 使用完毕后，为避免因长时间闲置出现的当机问题，请长按 5 秒“开关按钮”进行关机。



如有任何问题或需要协助，请与 F&OC 同事联系。

联络电话：2621 0608 / 2621 0676